


BDP® FL-Ceramid

<http://de.lumiprobe.com/p/bdp-fl-ceramide-c3>

Ceramide sind Vorläufer von Sphingolipiden, die aus Sphingosin und einer Fettsäure bestehen, die durch eine Amidbindung verbunden sind. Dieses BDP FL-Ceramid ist ein synthetisches fluoreszierendes Lipid, ein Konjugat des grün-emittierenden BDP FL Fluorophors mit Sphingosin. Innerhalb der Zelle wird das BDP FL-Ceramid in die Membranen des Golgi-Apparats eingebaut. Daher wird dieser Farbstoff in der Zellbiologie weit verbreitet eingesetzt, um den Golgi-Apparat in lebenden und fixierten Zellen mit Fluoreszenzmikroskopie zu visualisieren.

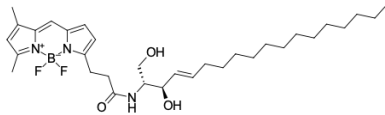

Struktur von BDP FL-Ceramid

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Erscheinungsform: | orange Feststoff |
| Molekülmasse: | 573.57 |
| CAS-Nummer: | 2730893-01-1 |
| Molekülformel: | $C_{32}H_{50}BF_2N_3O_3$ |
| Löslichkeit: | gute Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln |
| Qualitätskontrolle: | NMR 1H und HPLC-MS ($\geq 95\%$) |
| Lagerungsbedingungen: | 24 Monate ab dem Wareneingang bei -20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern. Längere Lichteinwirkung vermeiden. |
| Rechtliche Hinweise: | Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen. |

Spektrale Eigenschaften

| | |
|---|-------|
| Anregungs-/Absorptionsmaximum / nm: | 503 |
| ϵ / $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$: | 92000 |
| Emissionsmaximum / nm: | 509 |
| Fluoreszenz-Quantenausbeute: | 0.97 |
| CF_{260} : | 0.015 |
| CF_{280} : | 0.027 |

BDP® ist eine Marke von Lumiprobe