


## PO-TAP-3, gelb fluoreszierender Nukleinsäurefarbstoff

<http://de.lumiprobe.com/p/po-pro-3-nucleic-acid-stain>


PO-TAP-3 (Oxazole Orange Monomer, auch bekannt als PO-PRO®-3) ist ein gelb fluoreszierender Carbocyanin-Monomerfarbstoff. PO-TAP-3 ist ein nicht zellgängiger Nukleinsäurefarbstoff, der in Abwesenheit von Nukleinsäuren nicht fluoreszierend ist, aber eine mehrfache Fluoreszenzsteigerung zeigt, wenn er an dsDNA bindet.

Das intensive Fluoreszenzsignal und der geringe Hintergrund machen PO-TAP-3 ideal für die Färbung von Nukleinsäuren auf Mikroarrays sowie für die Kontrastierung von Kernen und Chromosomen in Mehrfarben-Fluoreszenzmarkierungsexperimenten.

Der Farbstoff wird verwendet, um Zellkerne und Zytoplasma abzubilden, Bakterien und Spermien zu markieren, Retikulozyten zu zählen, Nukleinsäureamplifikation und -hybridisierung durchzuführen und als Temperatursensor.

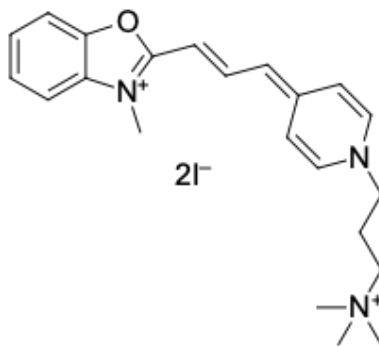

**Struktur von PO-TAP-3**

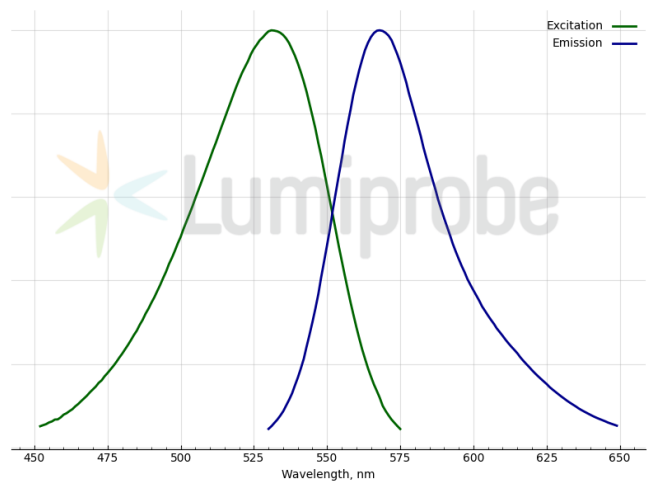

**Anregungs- und Emissionsspektren von PO-TAP-3 (DNA-Farbstoff-Komplex)**

### Allgemeine Eigenschaften

Erscheinungsform:	rote Lösung
Molekülmasse:	605.30
CAS-Nummer:	161016-55-3
Molekülformel:	C <sub>22</sub> H <sub>29</sub> I <sub>2</sub> N <sub>3</sub> O
IUPAC-Name:	Benzoxazolium, 3-methyl-2-[3-[1-[3-(trimethylammonio)-propyl]-4(1H)-pyridinylidene]-1-propenyl]-, diiodide
Löslichkeit:	DMSO
Qualitätskontrolle:	NMR <sup>1</sup> H und HPLC-MS (≥95 %)
Lagerungsbedingungen:	24 Monate ab dem Wareneingang bei -20 °C an einem lichtgeschützten Ort. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern.
Rechtliche Hinweise:	Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen.

### Spektrale Eigenschaften

Anregungs-/Absorptionsmaximum / 531 (complex)  
nm:

Emissionsmaximum / nm: 568 (complex)

PO-PRO® ist das Warenzeichen von Molecular Probes.