


## Universelles CPG-Trägermaterial Typ II, 1000 Å

<http://de.lumiprobe.com/p/universal-cpg-type-2-nylinker>

Der Festphasenträger CPG Typ II, 1000Å mit einem breiten Anwendungsspektrum wurde für die Immobilisierung von Nucleosiden bei einer Oligonucleotidsynthese und für die Beschleunigung der Dephosphorylierung des 3'-Endes beim Entschützen entwickelt.

Die Abspaltung vom Träger und die Entschützung können mit Ammoniak, Ammoniak-Methylamin-Gemisch oder anderen basischen Reagenzien in einem wasserfreien Gasmilieu noch schneller erfolgen. CPG Typ II, 1000 Å eignet sich für die Entschützung unter harten Bedingungen. Die Abspaltung und Entschützung verlaufen schneller als bei Anwendung anderer Festphasenträger. Das 1000 Å controlled pore glass wird die Synthese von Oligonucleotiden mit einer Länge von bis zu 100 Basen empfohlen. Empfohlenes [CPG 500 Å](#) für kürzere Oligonucleotide

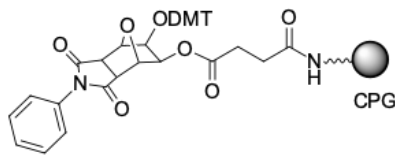

### Struktur von Universelles CPG-Trägermaterial Typ II, 1000 Å

#### Allgemeine Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Erscheinungsform:  | weißes Pulver  |
| Qualitätskontrolle:                                      | Beladungsmessung, Funktionstest (Oligonucleotidsynthese).  |
| Lagerungsbedingungen:                                    | 24 Monate nach Wareneingang bei -20 °C im Dunkeln. Transport: bei Raumtemperatur bis zu drei Wochen. Trocken lagern.   |
| Rechtliche Hinweise:                                     | Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke angeboten und verkauft. Es wurde nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit in Nahrungsmitteln, pharmazeutischen Produkten, medizinischen Vorrichtungen, Kosmetika sowie für gewerbliche oder andere Einsatzzwecke getestet. Der Verkauf gewährt oder impliziert nicht die Erlaubnis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder pharmazeutischen Produkten, in medizinischen Vorrichtungen sowie in kosmetischen Erzeugnissen. |
| Porengröße / Å:  | 1000   |
| Typische Kapazität / $\mu\text{mol}\cdot\text{g}^{-1}$ : | 40-60  |
| Kopplungsbedingungen:                                    | Standardkopplung für universelle Trägermaterialien   |
| Schutzgruppen entfernen:                                 | 2 Stunden bei 80 °C mit konzentriertem Ammoniak; 15 Minuten bei 65 °C mit AMA, (1:1-Mischung aus 30%igem Ammoniak und 40%igem wässrigem Methylamin).   |